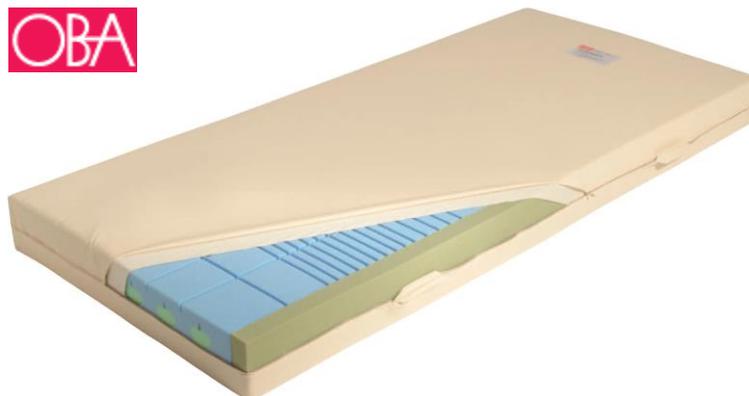


Nome Prodotto

Materasso Antidecubito Oba Hospisoft TX.

Codice	Misure	Portata Min	Portata Max
05.05.OBAHTX	200x90x15 cm	50 Kg	150 Kg
05.05.OBAHTTX120	200x120x15 cm	50 Kg	150 Kg

**Destinazione d'uso**

Dispositivo destinato alla prevenzione delle piaghe da decubito in soggetti che devono mantenere la posizione sdraiata per prolungati periodi di tempo, pazienti geriatrici, soggetti con scarsa mobilità e soggetti con cute sensibile ed arrossata. Destinato per l'utilizzo in strutture ospedaliere, case di riposo e case di cura. Il dispositivo viene classificato con grado di antidecubito 3, secondo scala EPUAP.

Descrizione

Il materasso OBA HOSPISOFT è realizzato in espanso di schiuma EvoPore di alta qualità con densità e lavorazioni differenziate.

Il materasso garantisce un'efficace prevenzione della formazione di ulcere da decubito ed assicura un piacevole confort fornendo un supporto ideale grazie alla schiuma che si adatta alla morfologia del corpo del paziente.

La parte centrale è caratterizzata da canali di areazione orizzontali e verticali, che garantiscono una ventilazione ottimale riducendo la sudorazione della cute.

I bordi rinforzati garantiscono una buona stabilità riducendo i rischi di scivolamento, facilitano il sollevamento da parte della persona aiutandola nell'entrata e uscita dal letto e supportano ottimamente i trasferimenti laterali del paziente. Il materasso è dotato di due superfici simmetriche aventi stessa lavorazione, che permettono di capovolgere il materasso ciclicamente prolungandone notevolmente la durata di utilizzo.

La fodera in OBATEX ignifugo, traspirante, impermeabile, antibatterico è realizzata in poliuretano e poliestere, sterilizzabile in autoclave con cerniera di chiusura sui tre lati.

Materiali	
Lastra d'Appoggio	Espanso di schiuma EvoPore con Densità 45 Kg/m ³
Lastra Intermedia	Espanso di schiuma EvoPore con Densità 40 Kg/m ³
Lastra di Base	Espanso di schiuma EvoPore con Densità 45 Kg/m ³
Bordi	Espanso di schiuma EvoPore con Densità 50 Kg/m ³
Fodera	Obatex
Manutenzione e Pulizia Fodera	
	Lavaggio Max. 95°C
	Non Candeggiare
	Non Stirare
	Lavare a Secco con Qualsiasi Solvente
	Asciugatura a Tamburo Possibile a Bassa Temperatura
Sterilizzazione possibile in autoclave fino a 134°C, ciclo gomma	
Manutenzione e Pulizia Materasso	

Pulizia possibile con un panno umido e un detergente neutro	
Prima dell'utilizzo far asciugare accuratamente il materasso senza esporlo però alla luce diretta del sole	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Garanzia Oba	10 anni secondo quanto riportato nel manuale di utilizzo
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	OBA AG
Distributore Autorizzato	Demarta Virginio S.r.l
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice ISO DM 332/99	03.33.06.006
Codice ISO DPCM 12.01.2017	04.33.06.006
Codice CND	V080702
Codice RDM	2561578/R

Product Name

Matress Oba Hospisoft TX.

Code	Dimensions	Min Capacity	Max Capacity
05.05.OBAMTX	200x90x15 cm	50 Kg	150 Kg
05.05.OBAHTTX120	200x120x15 cm	50 Kg	150 Kg



Use

D Device intended for the prevention of bedsores in subjects who must maintain a lying position for prolonged periods of time, geriatric patients, subjects with poor mobility and subjects with sensitive and red skin. Intended for use in hospital facilities, retirement homes and nursing homes. The device is classified with anti-decubitus grade 3, according to the EPUAP scale.

Description

The OBA HOSPISOFT mattress is made of high quality EvoPore foam with differentiated density and processing. The mattress guarantees effective prevention of the formation of pressure ulcers and ensures pleasant comfort by providing ideal support thanks to the foam that adapts to the morphology of the patient's body. The central part is characterized by horizontal and vertical ventilation channels, which guarantee optimal ventilation, reducing skin sweating. The reinforced edges guarantee good stability, reducing the risk of slipping, making it easier for the person to lift, helping them get in and out of bed and excellently support the patient's lateral transfers. The mattress is equipped with two symmetrical surfaces with the same workmanship, which allow the mattress to be turned over cyclically, significantly extending its duration of use. The fire retardant, breathable, waterproof and antibacterial OBATEX lining is made of polyurethane and polyester, sterilizable in an autoclave with a closing zip on three sides.

Materials	
Support Layer	EvoPore Foam with a Density of 45 Kg/m ³
Intermediate Layer	EvoPore Foam with a Density of 40 Kg/m ³
Base	EvoPore Foam with a Density of 45 Kg/m ³
Borders	EvoPore Foam with a Density of 50 Kg/m ³
Cover	Obatex
Cover Maintenance and Cleaning	
	Water Temperature not Above 95°C or 200°F
	Do not Bleach
	Do not Iron
	Dryclean with any Solvent
	Tumble Dry Low Heat
Sterilization is possible in autoclave up to 134° C, rubber cycle	

Mattress Maintenance and Cleaning	
Possible cleaning with a damp cloth and neutral detergent	
Before use dry the mattress carefully without exposing it to direct sunlight	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Oba Warranty	10 years as reported in the user manual
Product References	
Manufacturer	OBA AG
Authorized Distributor	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
ISO Code DM 332/99	03.33.06.006
ISO Code DPCM 12.01.2017	04.33.06.006
CND Code	V080702
RDM Code	2561578/R